

**Prodigy™ Connect<sup>12</sup>**



## Guide d'utilisation



**Humanware™**

voir les choses. **différemment.**



# TABLE DES MATIÈRES

Chapitre 1 – Introduction.....	2
Chapitre 2 – Se familiariser avec Prodigis .....	4
Contenu de la boîte .....	4
Coup d’oeil sur Prodigis Connect .....	5
Démarrage .....	12
Chapitre 3 – Utiliser Prodigis .....	17
Bannière de boutons .....	17
Utiliser la loupe.....	18
Capturer et lire .....	22
Utiliser le menu Carrousel .....	29
Voir les documents sauvegardés.....	31
Utiliser la caméra à distance .....	33
Voir les photos de la caméra à distance .....	41
Retirer la caméra à distance de son support. ....	43
Visionner des fichiers texte dans Prodigis .....	44
Chapitre 4 – Choisir le contraste .....	46
Chapitre 5 – Changer les réglages.....	49
Visuel .....	52
Audio.....	53
Général .....	54
À propos.....	55
Chapitre 6 – Accéder à Android .....	55
Chapitre 7 – Recharger la tablette .....	56
Chapitre 8 – Recharger la caméra à distance .....	58
Chapitre 9 – Mise à jour logicielle .....	59
Chapitre 10 – Dépannage.....	61

# CHAPITRE 1 – INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté Prodigy™ Connect 12, l'assistant de vision contrôlé par le toucher de HumanWare, leader mondial des technologies d'assistance pour les personnes ayant une basse vision. Prodigy est une ligne de produits simple, intelligente, portable et adaptable dont le but est de maintenir et restaurer l'indépendance des personnes vivant avec une perte de vision.

Prodigy™ Connect 12 est un système complet de grossissement électronique qui vous permet de grossir et lire des documents, capturer des images, et trouver une information rapidement, où que vous soyez.

Lisez attentivement les instructions décrites dans le présent guide d'utilisation avant d'utiliser Prodigy. Si vous avez des questions sur votre système, veuillez contacter le service à la clientèle de HumanWare en consultant les informations à l'endos de ce guide.

Droits d'auteur 2015 : Technologies HumanWare Inc., tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être

reproduite ou distribuée sous n'importe quelle forme et par quelque procédé que ce soit, gardée dans une base de données ou un système de recherche, sans l'accord préalable par écrit de Technologies HumanWare Inc.

# CHAPITRE 2 – SE FAMILIARISER AVEC PRODIGI

## CONTENU DE LA BOÎTE

### Étui de transport protecteur

- Tablette Samsung Galaxy Note Pro
- Bloc d'alimentation
- Câble de recharge USB
- Support pliable
- 5 embouts de stylet

### Option Caméra à distance


- Caméra à distance
- Support pour téléphone intelligent
- Support pour caméra
- Câble micro-USB
- Dragonne
- Guide de mise en route de Sony
- Guide de référence de Sony

### Boîte de Prodigy

- Guide de démarrage
- Guide d'utilisation
- Garantie

# COUP D'OEIL SUR PRODIGI CONNECT

## Vue de face

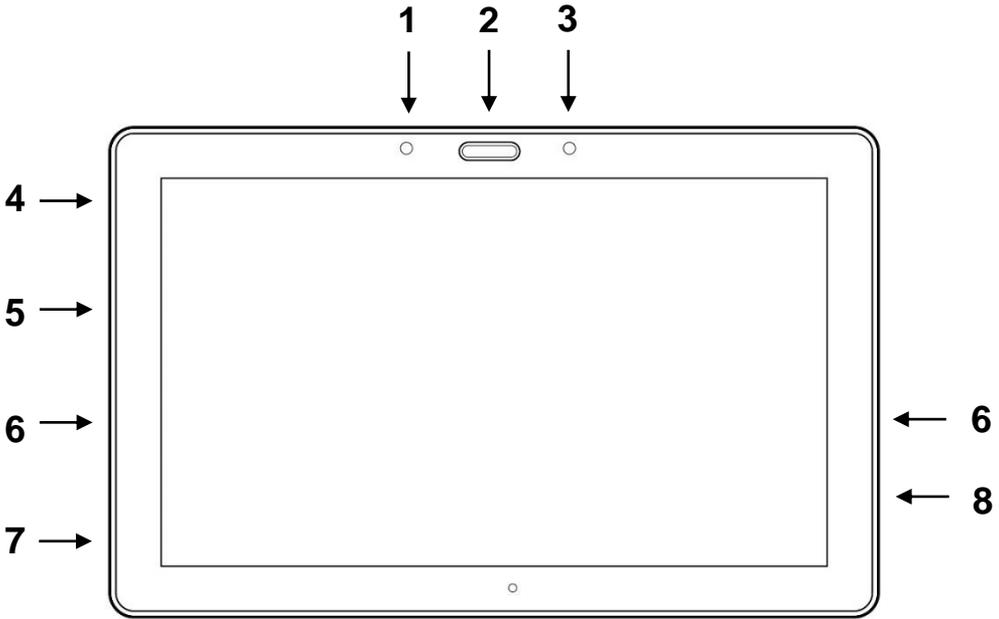


1. Bouton Retour (pas un bouton physique)
2. Bouton Accueil
3. Bouton Applications récentes (pas un bouton physique)
4. Prise pour carte MicroSD
5. Prise USB
6. Hautparleur
7. Stylet
8. Prise pour écouteur

## Bord inférieur



1. Boutons de volume
2. Bouton Allumer/Éteindre

## Vue arrière

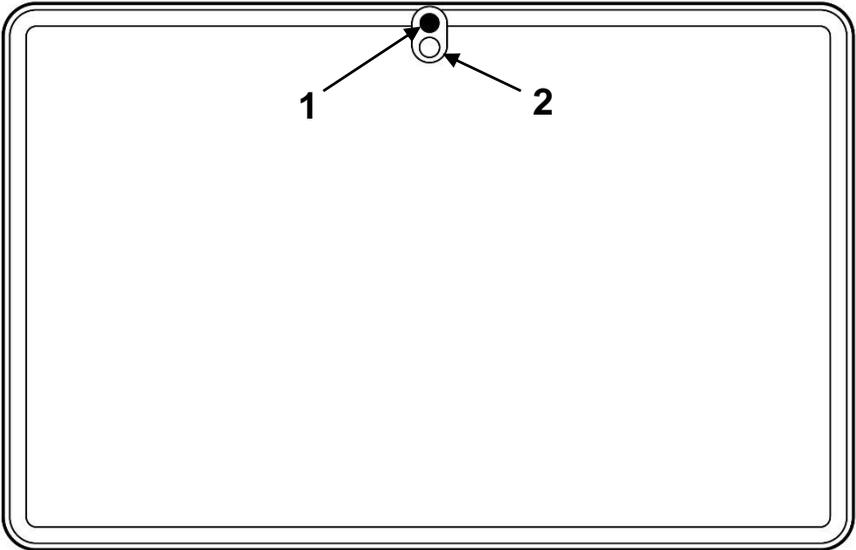

1. Caméra
2. Flash

## Bannière de boutons




1. Bouton Retour
2. Bouton Réglages
3. Bouton Lumière
4. Bouton Capture/Lecture
5. Bouton Zoom arrière
6. Bouton Zoom avant




1. Bouton Ouvrir bannière

## Support pliable

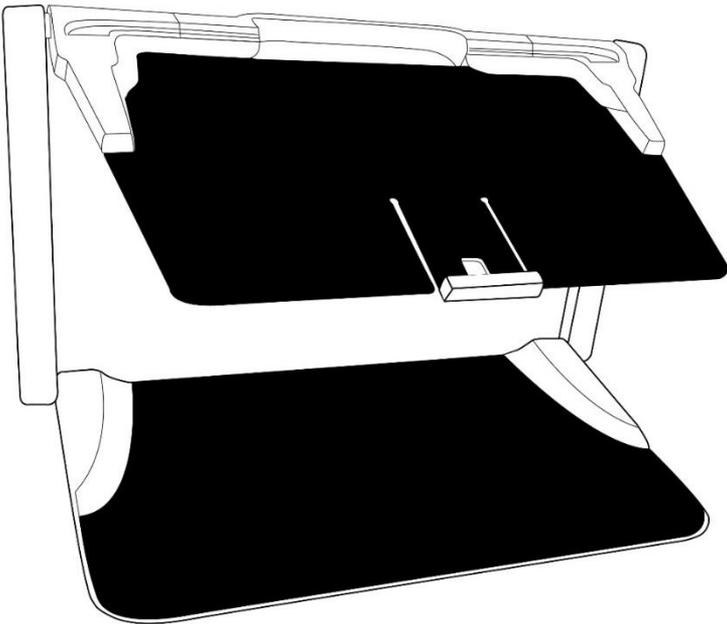


## Caméra à distance

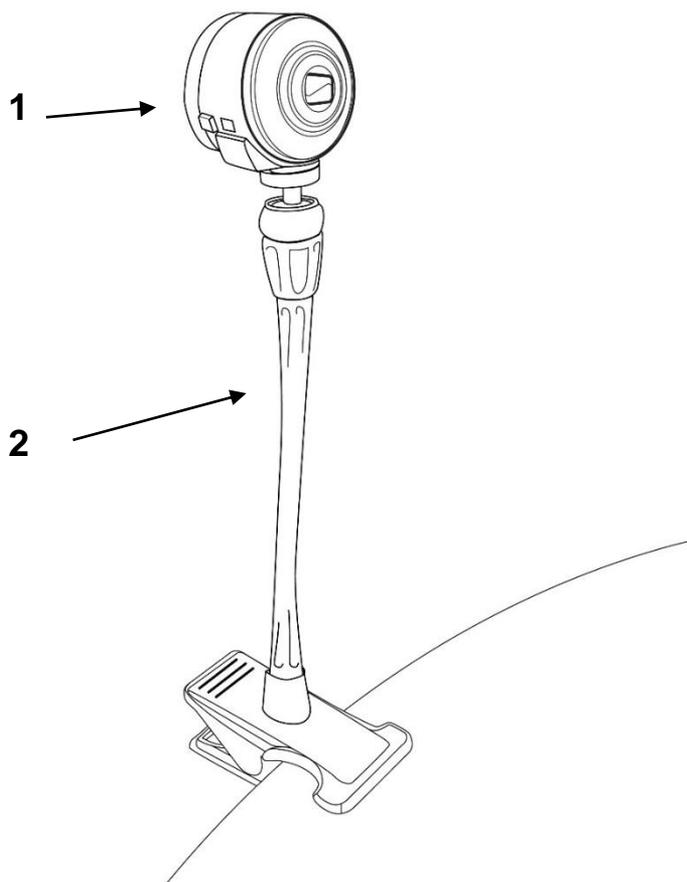


1. Caméra à distance
2. Support pour caméra


## Vue de face

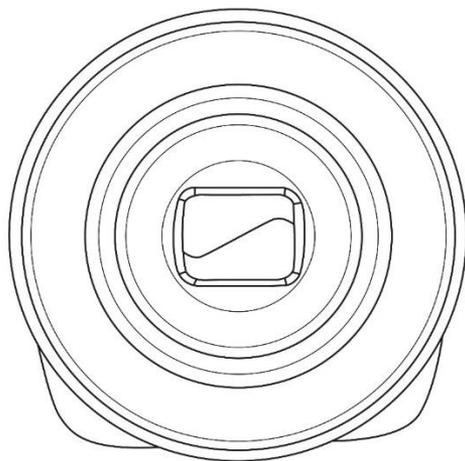

## Vue arrière

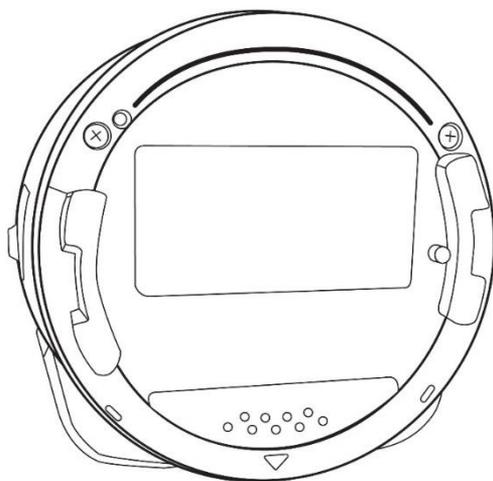


## Vue de haut

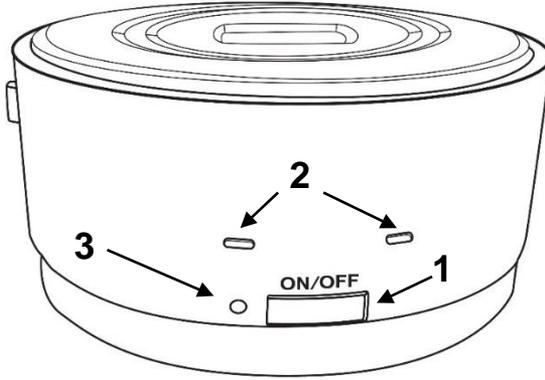

1. Bouton Allumer
2. Micro
3. Témoin Alimentation/Charge/Film

## Vue de gauche

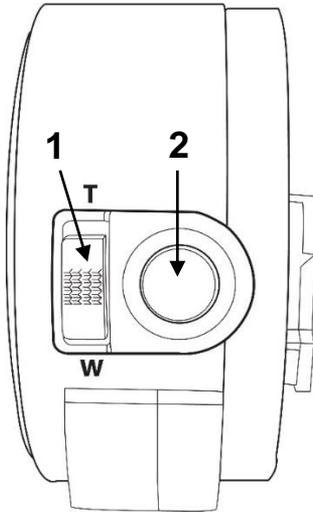




1. Manette de zoom
2. Déclencheur

**IMPORTANT:** Il est essentiel que vous conserviez le guide de mise en route (anglais) fourni avec votre caméra à distance Sony puisqu'il contient les informations de couplage pour votre tablette. Si votre tablette doit être réinitialisée, Humanware sera dans l'impossibilité de vous aider si vous n'avez plus votre guide de mise en route.


## DÉMARRAGE

1. Déposez le support pliable sur une surface plate et stable et dépliez-le.

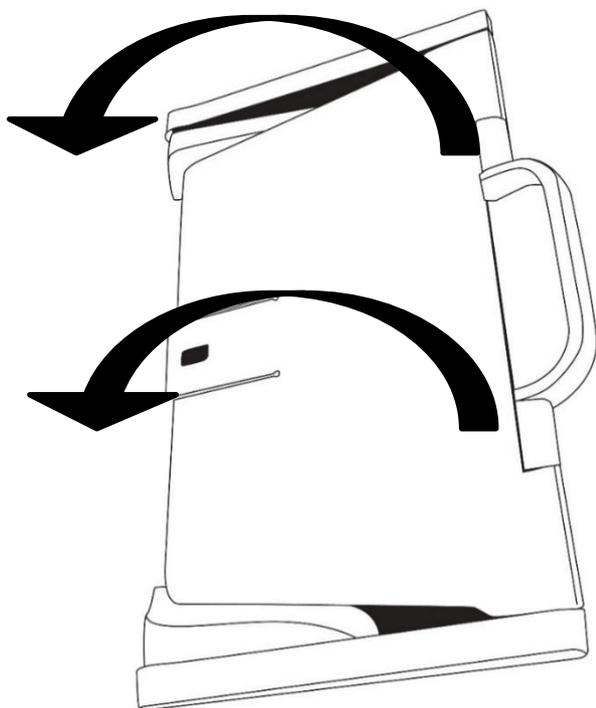


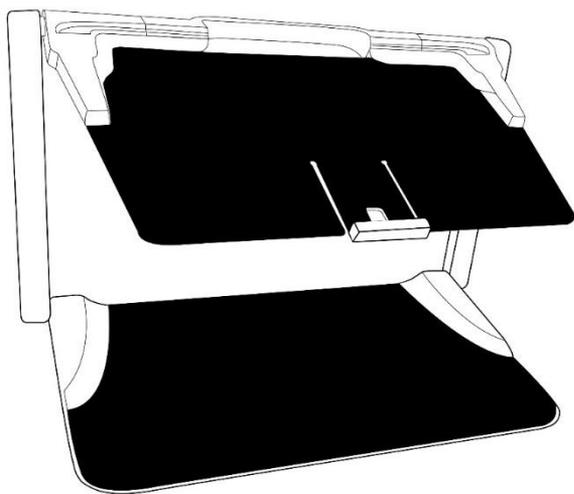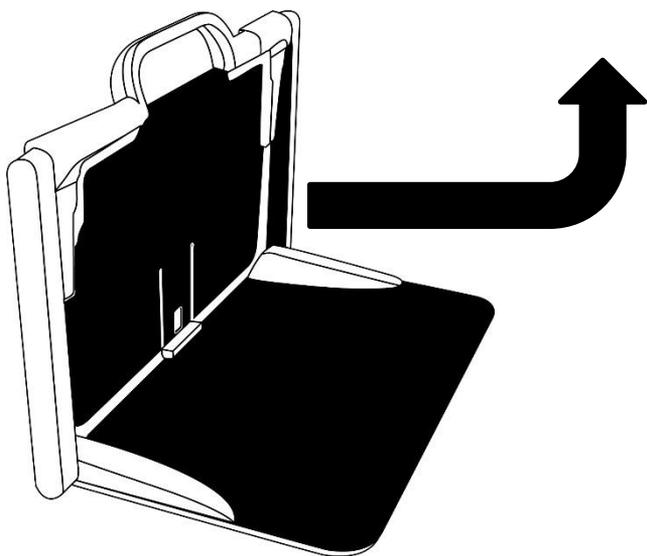


2. Tenez la tablette entre vos mains en vous assurant que l'écran est orienté vers le haut et que le logo de HumanWare est bien droit. Insérez délicatement votre tablette dans la fente prévue à cet effet et glissez votre tablette vers l'arrière jusqu'à ce que la tablette soit au fond de la fente. Relevez ensuite le crochet pour que la tablette soit bien fixée au support pliable.

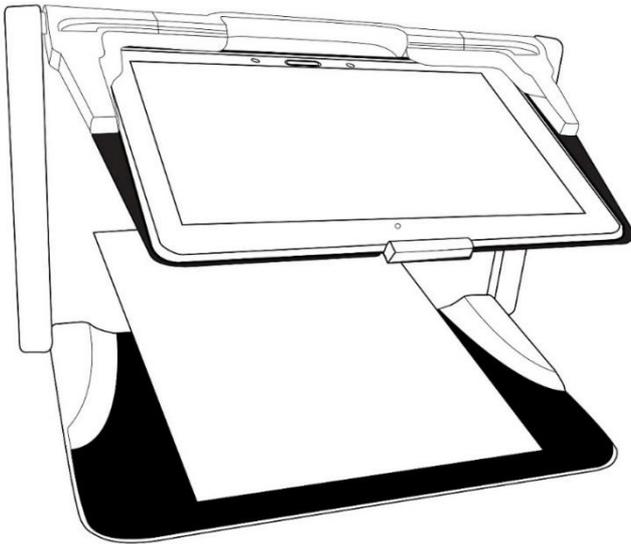

3. Branchez le câble USB au bloc d'alimentation.

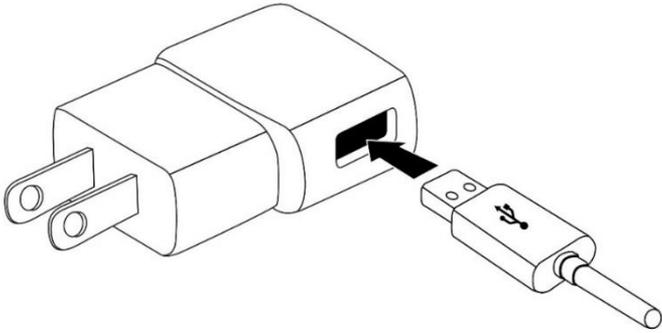

4. Branchez soigneusement le câble au port de recharge, puis branchez l'autre extrémité à une prise de courant.

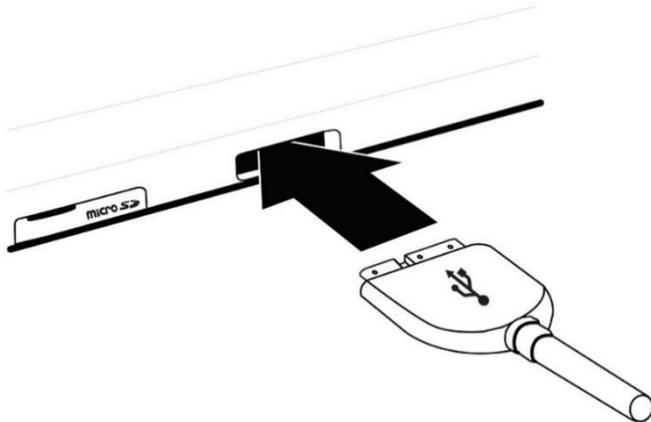

**IMPORTANT : Faites attention lorsque vous branchez le câble au port de recharge.**

**IMPORTANT : Ne repliez jamais votre support pliable lorsque votre tablette s'y**

**trouve et que le câble de recharge est branché. Vous pourriez gravement endommager votre câble de recharge ou votre tablette.**

- 5. Laissez votre tablette se recharger jusqu'à ce que la pile soit pleine.**
- 6. Maintenez enfoncé le bouton Allumer pour allumer votre tablette. Votre tablette prendra environ 30 secondes pour s'initialiser. Le logo de Samsung apparaîtra à l'écran.**

## CHAPITRE 3 – UTILISER PRODIGI

### BANNIÈRE DE BOUTONS

La plupart des actions de Prodigy Connect s'effectuent à partir de la Bannière de boutons virtuels située au bas de votre écran.



Si vous souhaitez cacher cette bannière afin de mieux voir votre écran, glissez votre doigt vers le bas sur votre écran. La bannière sera remplacée par le bouton Ouvrir bannière au bas de votre écran.

Touchez ce bouton ou glissez votre doigt vers le haut de votre écran pour rouvrir la Bannière de boutons.



## UTILISER LA LOUPE

- Allumez votre tablette.
- Alignez votre tablette au-dessus du document ou de l'objet que vous souhaitez regarder.
- Il est conseillé d'utiliser le support pliable pour stabiliser votre tablette au-dessus du document que vous souhaitez regarder.
- Déplacez l'objet ou le document sous votre tablette pour trouver l'information que vous recherchez.

- Touchez le bouton lumière pour allumer la lumière de la tablette si l'image est trop sombre.



- Touchez les boutons Zoom avant-arrière pour ajuster le zoom. Pour augmenter la taille des caractères, touchez le bouton Zoom avant (celui de droite). Pour diminuer la taille des caractères, touchez le bouton Zoom arrière (celui de gauche). Vous pouvez également garder votre doigt sur un des boutons Zoom avant-arrière pour ajuster progressivement le niveau de grossissement, puis relâcher lorsque vous avez atteint le zoom souhaité.



- En plus des touches Zoom avant-arrière, vous pouvez utiliser le geste pincer et agrandir pour ajuster le niveau de

grossissement. Réduisez la distance entre 2 doigts pour diminuer le niveau de grossissement et augmentez la distance pour augmenter le niveau de grossissement :



- Pour basculer entre les contrastes couleur, positif, et négatif, glissez simplement votre doigt vers le haut ou vers le bas sur la partie droite de l'écran (pour plus de détails, consultez le **Chapitre 4 – Choisir le contraste**).



**Note** : Prodigy Connect vous permet de décider si vous souhaitez verrouiller l'autofocus (la mise au point automatique). Il s'agit d'une fonctionnalité utile si vous avez trouvé la bonne mise au point pour un de vos documents et souhaitez la conserver pendant que vous faites une tâche manuelle devant la caméra, par exemple écrire sur une feuille de papier, et que vous voulez éviter que la caméra fasse la mise au point sur votre main.



## CAPTURER ET LIRE

- Positionnez la tablette à 13 cm (5 pouces) ou plus au-dessus du document ou l'objet que vous voulez regarder.
- Touchez le bouton Capture pour capturer votre document ou gardez votre doigt sur l'écran pendant 2 secondes.



- Un déclic sonore vous indiquera que la capture a été faite. Votre image sera sauvegardée dans la galerie pour une utilisation ultérieure. Touchez le bouton Retour pour revenir à la Loupe.

**Note :** Lorsque vous avez pris une capture, le bouton Capture passera d'une image de caméra à un symbole lecture. Il s'agit maintenant du bouton Lecture.



- Touchez le bouton Lecture ou gardez votre doigt sur l'écran pendant 2 secondes pour faire défiler le texte et le lire à haute voix selon vos préférences de lecture.



**Note :** Lorsque vous touchez le bouton Lecture, la Bannière de boutons disparaîtra pour vous permettre de mieux voir votre image. Elle peut être rouverte en touchant le bouton Ouvrir Bannière ou en glissant votre doigt vers le haut.

- Pour ajuster le volume, appuyez sur les boutons volume.
- Pour mettre la lecture en pause, touchez de nouveau le bouton Lecture ou gardez votre doigt sur l'écran pendant 2 secondes.

- Lorsque la lecture est en pause, touchez le bouton Retour pour arrêter la lecture, et touchez le bouton Retour de nouveau pour revenir à la galerie.



- Pour reprendre la lecture, touchez de nouveau le bouton Lecture ou gardez votre doigt sur l'écran pendant 2 secondes.

Comme dans le mode loupe, le mode lecture vous permet de faire un zoom avant et arrière sur vos images sauvegardées.


Pour agrandir un document capturé :

- Touchez les boutons Zoom avant-arrière pour ajuster le zoom. Pour augmenter la taille des caractères, touchez le bouton Zoom avant (celui de droite). Pour diminuer la taille des caractères, touchez le bouton Zoom arrière (celui de gauche). Vous pouvez également garder votre

doigt sur un des boutons Zoom avant-arrière pour ajuster progressivement le niveau de grossissement, puis relâcher lorsque vous avez atteint le zoom souhaité.

- Pour agrandir instantanément un point d'intérêt, touchez une fois sur la zone que vous souhaitez regarder et l'image s'agrandira à votre niveau de grossissement favori.

Si vous êtes à un niveau de grossissement supérieur à 1X, vous pouvez vous déplacer à l'intérieur de votre document agrandi en déplaçant un doigt sur l'écran sans le soulever.

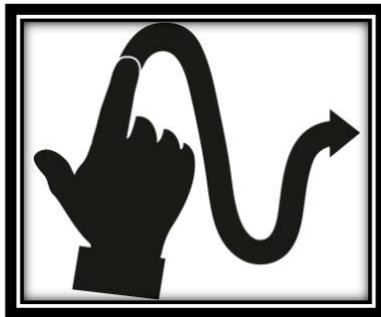

- **Déplacez** votre doigt sur l'écran pour atteindre d'autres sections de votre image agrandie.

- Pour basculer entre les contrastes couleur, positif, et négatif, glissez simplement votre doigt vers le haut ou vers le bas sur la partie droite de votre écran (pour plus de détails, consultez le **Chapitre 4 – Choisir le contraste**).



**Note :** Le texte peut être présenté de 3 façons différentes (Modes de lecture) : il peut être transformé en une seule ligne dans le Mode Ligne, en une colonne dans le Mode Colonne, ou vous pouvez lire le texte en conservant son formatage original dans le Mode Page (par défaut). Deux signes d'inégalité « supérieur à »

marqueront la fin d'un paragraphe en mode Ligne et Colonne (>>). Vous entendrez un bip sonore et Prodigy annoncera « Fin du document » lorsque vous aurez atteint la fin du document; appuyez sur Lecture pour recommencer à lire à partir du début de la page.

- Pour régler le Mode de lecture, touchez le bouton Réglages pour accéder aux Réglages, et sélectionnez Mode de lecture.



- Glissez votre doigt sur l'écran pour changer votre mode de lecture. Touchez le bouton Retour pour quitter le menu Réglages.

**Note** : Vous pouvez augmenter le débit de la voix en **glissant et relâchant votre doigt vers la gauche** sur l'écran, et diminuer le débit de la voix en **glissant vers la droite**.



Veillez noter que changer le débit de la voix changera la vitesse de lecture (vitesse de défilement du texte) en conséquence.

- Pour désactiver la parole, **touchez l'écran deux fois**, ou touchez le bouton Réglages, choisissez l'option Parole, puis faites glisser votre doigt sur l'écran pour choisir Document seulement ou Désactivée.

**Note** : Vous serez en mesure de changer la vitesse de lecture (défilement) en glissant vers la gauche ou la droite, ou à partir du menu des

Réglages (menu Visuel, sous-menu Texte) même lorsque la parole est désactivée.

- Prodigy contient 2 voix différentes pour lire à voix haute les documents contenant du texte. Pour changer de voix, touchez le bouton Réglages, choisissez Voix, et touchez pour basculer entre les 2 voix.
- Touchez le bouton Retour pour revenir à votre document. Assurez-vous que la langue de la voix sélectionnée correspond à celle du document que vous souhaitez lire.
- Touchez le bouton Retour pour arrêter la lecture.

## UTILISER LE MENU CARROUSEL

Prodigi possède 4 applications principales : la Loupe, la Galerie, les Réglages et la Caméra à Distance (seulement disponible si vous avez acheté l'ensemble avec caméra à distance).

Elles sont présentées les unes à la suite des autres dans le menu carrousel :



Pour accéder au menu carrousel à partir de la Loupe :

- Touchez le bouton Retour pour sortir de la Loupe et accéder au menu carrousel.
- Prodigy annoncera « Carrousel principal » suivi de l'application sélectionnée. L'application sélectionnée se trouve au milieu de l'écran :



- **Glissez** vers la gauche ou la droite dans le menu carrousel pour sélectionner une application.
- Pour ouvrir une application sélectionnée, touchez l'icône de l'application.

- Pour fermer une application, touchez le bouton Retour.

## VOIR LES DOCUMENTS SAUVEGARDÉS

La Galerie contient tous les documents préalablement sauvegardés.

- Sélectionnez et ouvrez la Galerie dans le menu carrousel:



- Glissez vers la gauche ou la droite dans la Galerie pour parcourir vos documents sauvegardés.
- Le document sélectionné se trouve au milieu de l'écran. Prodigy annoncera le premier mot contenu dans le document sélectionné et l'indiquera dans la Galerie. Si le document ne contient pas de mots, Prodigy le marquera en tant qu'image.
- Pour ouvrir un document sélectionné, touchez l'image de ce document.

- Touchez une zone de votre document pour afficher cette zone à votre niveau de grossissement favori.
- Vous pouvez basculer entre les contrastes couleur, positif, négatif, et Haute Précision (si l'image contient du texte), et ajuster la luminosité de la même façon qu'avec la Loupe. Veuillez consulter le chapitre 3, section Agrandir pour plus d'informations.
- Lorsque votre niveau de grossissement est supérieur à 1X, vous pouvez vous déplacer dans votre document agrandi en déplaçant votre doigt sur l'écran.
- **Déplacez** votre doigt sur l'écran pour atteindre d'autres sections de l'image agrandie.
- Touchez l'écran ou touchez le bouton Retour pour revenir à l'image entière.
- Lorsque vous vous trouvez en affichage image entière, touchez Retour pour fermer un document et retourner à la Galerie

**Notes :** La Galerie ne peut pas contenir plus de 100 documents. À partir de ce nombre, Prodigy vous demandera d'effacer des documents de la Galerie avant d'en sauvegarder d'autres.

### **Pour effacer un document :**

- Dans la Galerie, gardez votre doigt sur l'image que vous voulez effacer. Prodigy vous demandera « EFFACER? » et un « X » rouge apparaîtra. Tapez pour confirmer, ou appuyez sur Retour pour annuler.



## **UTILISER LA CAMÉRA À DISTANCE**

Prodigi™ Connect 12 offre une caméra à distance très utile lorsque vous devez regarder un objet à distance, comme lors une


présentation ou pour regarder les diapositives d'un enseignant durant un cours. Votre caméra à distance se connecte par Wi-Fi, a une pile d'une durée de vie de 4 heures et fonctionne jusqu'à une distance de 10 mètres (30 pieds). La caméra est déjà couplée à votre tablette dès que vous la sortez de la boîte.

**Note :** La caméra à distance est seulement disponible si vous avez pris l'option caméra à distance lorsque vous avez acheté votre Prodigy Connect.


- Pour utiliser votre caméra à distance, alignez d'abord votre caméra avec l'objet que vous souhaitez regarder.

**IMPORTANT :** Fixez toujours votre support à caméra à un objet solide avant d'utiliser votre caméra à distance. Si vous placez simplement votre support à caméra debout sur une surface plate, il y a de fortes chances que votre caméra bascule et se brise.


**Vous pouvez fixer votre caméra à un bureau**

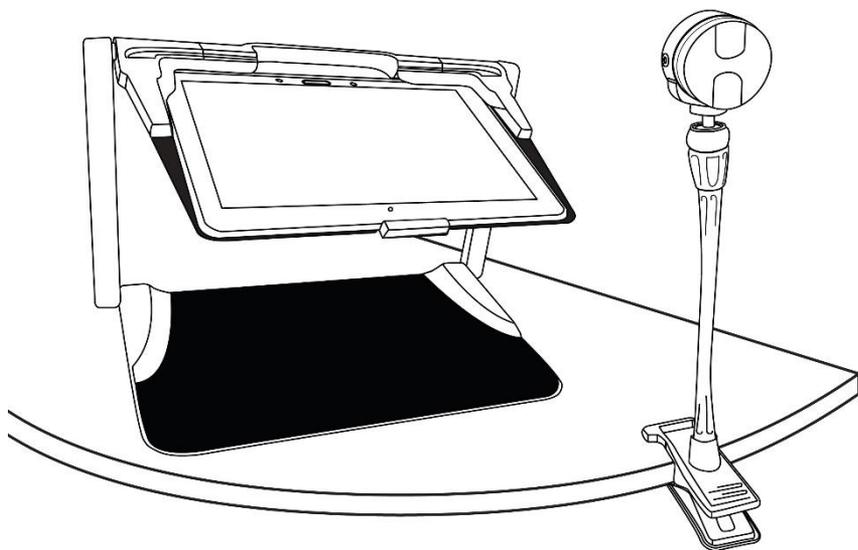


**Vous pouvez fixer votre caméra au cadre de votre support pliable**

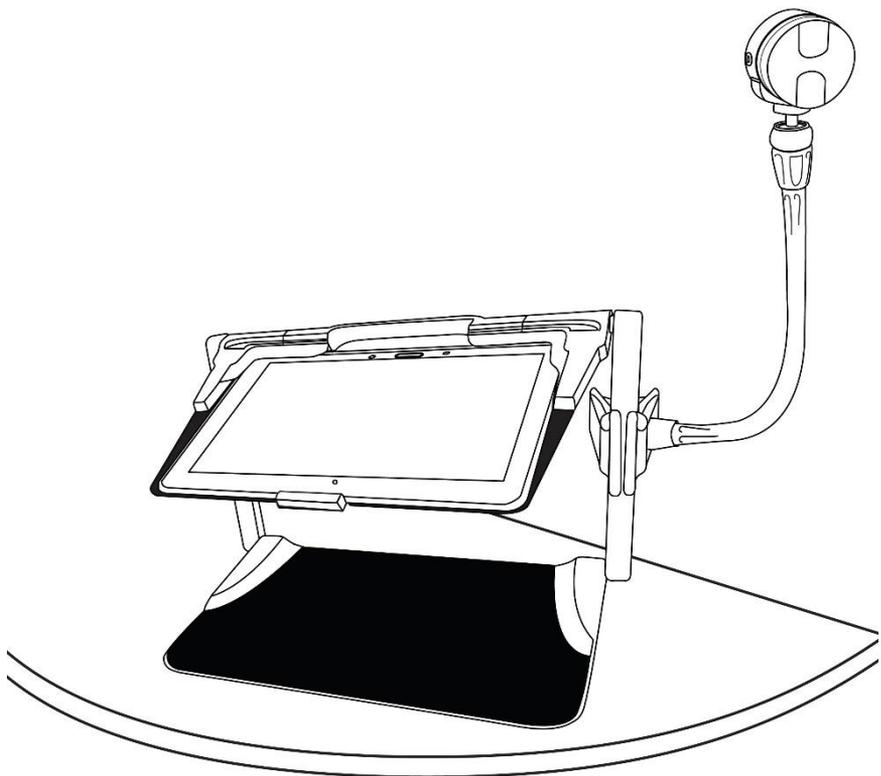

**Vous pouvez fixer votre caméra au haut  
du cadre de votre support pliable**

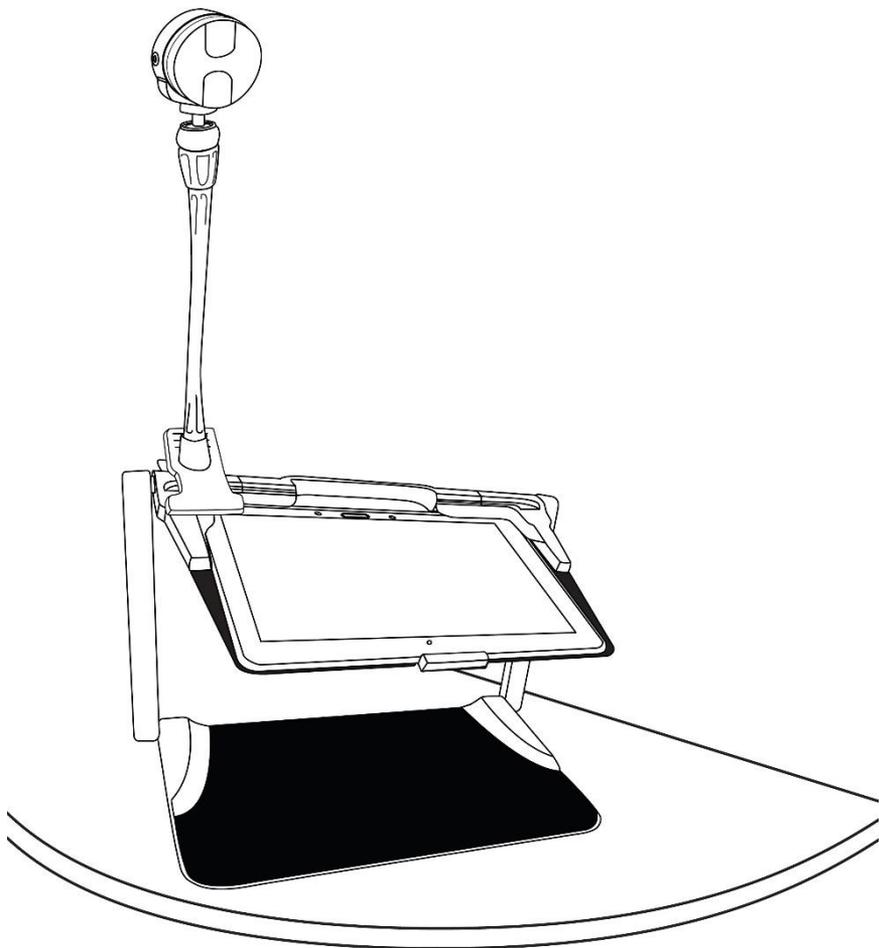

**NE JAMAIS utiliser la caméra à distance si elle n'est pas fixée à un objet solide.**

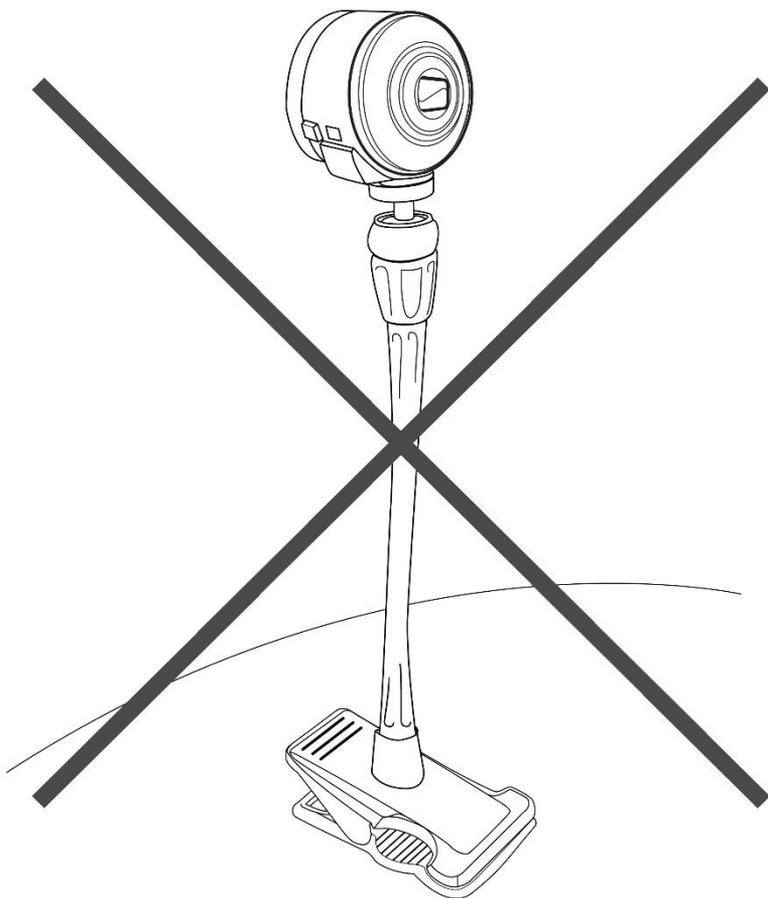

- Entrez dans le menu Carrousel en touchant le bouton Retour lorsque vous êtes en mode Loupe.
- Sélectionnez l'icône représentant une longue-vue et touchez l'icône.



- PlayMemories Mobile, le logiciel de capture de Sony, s'ouvrira.

**Note** : PlayMemories compte de nombreuses fonctionnalités qui ne sont pas détaillées dans ce manuel. Pour de plus amples informations sur la façon d'utiliser PlayMemories Mobile, veuillez vous référer au guide d'utilisation de Sony fourni dans la boîte de votre Prodigy ou rendez-vous sur le site de PlayMemories Mobile : <http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/disoft/int/playmemories-mobile/fr/index.html>

- Lorsque vous vous retrouvez dans PlayMemories, on vous demandera de vous brancher à votre caméra. Vous n'avez qu'à ouvrir votre Caméra Sony en appuyant sur le bouton de mise en marche situé sur le dessus de votre caméra.
- Votre caméra devrait apparaître dans PlayMemories – touchez l'encadré décrivant votre caméra pour établir la connexion.
- Votre caméra se trouve maintenant en mode temps réel. Pour prendre une capture, touchez l'icône de la caméra située sur le côté droit de votre écran. Vous pouvez également prendre une capture en appuyant sur le déclencheur situé près de la manette de zoom sur le côté gauche de votre caméra.
- Vous devriez entendre un son de confirmation et voir la photo que vous avez prise apparaître brièvement à l'écran. Vous serez ensuite redirigé au mode temps réel de la caméra.

- Lorsque vous êtes dans PlayMemories, vous pouvez faire un zoom avant ou arrière en touchant ou en gardant votre doigt sur le bouton W ou T situé à la droite de votre écran. Vous pouvez également utiliser la manette de zoom située à côté du déclencheur sur le côté gauche de votre caméra.
- Pour quitter PlayMemories et retourner à l'application Prodigy, appuyez sur le bouton Accueil situé au haut de votre tablette puis touchez deux fois l'icône de Prodigy. Vous pouvez également toucher le bouton Applications récentes situé en haut de votre tablette, puis toucher la fenêtre de Prodigy qui apparaîtra au bas de votre tablette.

## **VOIR LES PHOTOS DE LA CAMÉRA À DISTANCE**

Les photos prises dans PlayMemories peuvent être visionnées dans la Galerie de Prodigy de la même façon que les photos prises avec la Loupe de Prodigy.

Pour voir les photos prises avec la caméra à distance :

- Sélectionnez et ouvrez la Galerie dans le menu carrousel:



- Glissez vers la droite jusqu'à ce que vous ayez sélectionné l'icône de la Caméra à distance (longue-vue devant un dossier), et touchez l'image.



- Le document sélectionné est au centre de l'écran. Prodigy indiquera la date à laquelle la photo a été prise.
- Glissez à gauche ou à droite pour parcourir les images disponibles.
- Touchez l'image sélectionnée pour l'ouvrir.

## RETIRER LA CAMÉRA À DISTANCE DE SON SUPPORT

Votre caméra à distance est déjà fixée à son support lorsque vous la recevez. Si vous souhaitez la détacher de son support, suivez attentivement les indications suivantes :

- Assurez-vous que votre caméra est éteinte.
- Avec une main, tenez solidement la caméra à distance.
- Avec votre autre main, trouvez la glissière rectangulaire située sous la caméra. Glissez la partie supérieure de la glissière vers la gauche (lorsque vous regardez l'arrière de votre caméra) jusqu'à ce qu'elle soit détachée de son support.

**Attention** : La caméra est très fragile, alors assurez-vous de la tenir solidement avant de la retirer de son support.

## VISIONNER DES FICHIERS TEXTE DANS PRODIGI

Prodigi Connect vous permet de coller des fichiers texte dans la Galerie et de les ouvrir avec l'interface de Prodigi.

Pour coller un fichier texte dans Prodigi :

- Copiez dans le presse-papier de votre tablette le texte que vous souhaitez ajouter à Prodigi. Cela peut être fait à l'extérieur de Prodigi dans les applications d'Android qui vous permettent de copier-coller du texte (votre navigateur Internet ou vos courriels, par exemple).
- Touchez le bouton Retour pour ouvrir le menu Carrousel.
- Sélectionnez et touchez l'icône de la Galerie dans le menu Carrousel :



- Faites glisser votre doigt jusqu'à ce que l'icône Texte soit sélectionnée, puis touchez l'icône pour ouvrir la section Texte de la Galerie.



- Faites défiler les icônes jusqu'à ce que vous ayez sélectionné l'icône Coller. Touchez l'icône pour coller le texte que vous avez précédemment copié.
- Votre texte apparaîtra en mode Haute Précision.
- Touchez le bouton Retour pour retourner à la section Texte de la Galerie.
- Le texte que vous avez collé sera désormais sauvegardé dans la section Texte de votre Galerie et portera le nom du premier mot trouvé dans le texte.
- Touchez le bouton Retour deux fois pour revenir au menu Carrousel.

## CHAPITRE 4 – CHOISIR LE CONTRASTE

Prodigi vous permet de voir les documents, photos et objets en 3 contrastes différents : couleur, positif, ou négatif. Pour les documents contenant du texte, un quatrième contraste peut être utilisé : Haute Précision. Les contrastes positif, négatif, et Haute Précision sont des contrastes accrus; ils servent à améliorer la couleur originale d'un objet ou document afin d'améliorer votre expérience visuelle.

Pour basculer entre les différents contrastes, touchez le bouton Réglages pour accéder aux réglages, sélectionnez Contraste et sélectionnez le contraste de votre choix. Touchez le bouton Retour deux fois pour revenir à votre document.

Prodigi vous permet aussi de changer le contraste en glissant votre doigt sur le côté droit de l'écran tactile



Le contraste **couleur** est utilisé pour voir les documents, objets et photos dans leur couleur originale.

Le contraste **positif** montre le texte et les images en 2 couleurs selon votre choix de combinaison de couleurs, la combinaison par défaut étant Noir sur Blanc. Ce contraste est pratique puisqu'il vous permet de lire un texte dans la meilleure combinaison de couleurs possible pour vos yeux.

Le contraste **néгатif** montre le texte et les images en contraste inversé par rapport à votre choix de combinaison de couleurs. Par exemple, si votre choix de couleurs est Noir

sur Blanc, le contraste négatif montrera le texte et les images en Blanc sur Noir. Ce contraste est utile lorsque vous voulez inverser le contraste d'un texte contenant plusieurs contrastes différents.

Le contraste **Haute Précision** combine le meilleur des deux mondes; il montre le texte en haute définition dans votre choix de couleurs et les images dans leur couleur originale. Ce contraste vous permet d'agrandir indéfiniment le texte sans compromettre sa qualité tout gardant les images en couleur sur la même page.

**Note :** Le contraste ne peut pas être changé en mode Ligne ou Colonne, ou lorsque vous visionnez une image à 1x (en Mode Lecture ou dans la Galerie).

## CHAPITRE 5 – CHANGER LES RÉGLAGES

(**Note** : Les réglages marqués d'un astérisque (\*) sont des valeurs par défaut.)

Pour configurer votre système rapidement lorsque vous lisez un document, vous pouvez accéder au menu des Réglages en touchant le bouton Réglages. L'élément sélectionné est annoncé et entouré d'un rectangle. Défilez vers le haut ou le bas pour déplacer le rectangle et sélectionner un autre élément. Les éléments seront lus individuellement (par défaut). Tapez pour changer la valeur. Appuyez sur Retour (en haut à gauche de votre document) pour retourner à votre document.

Les Réglages montrent l'état de la pile et les réglages les plus souvent utilisés :

- **Luminosité** : (Changer la luminosité d'une image en Mode Temps Réel ou sauvegardée, sauf pour les images en 1x en Mode Lecture et dans la Galerie) : 0 à 100 % (50 %\*)

**Note :** Pour changer la luminosité, sélectionnez l'option de luminosité et touchez l'écran. Vous serez dirigé vers la Loupe où vous pourrez ajuster votre luminosité en vous servant des boutons Zoom avant-arrière.

- **Contraste :** Haute Précision (pour les documents capturés contenant du texte), Couleur\*, Positif, Négatif
- **Couleurs :** Noir sur blanc\* (voir liste des 16 paires de couleurs plus bas)
- **Mode de lecture :** Page\*, Colonne, Ligne
- **Parole:** Activée\*, Document seulement, Désactivée
- **Débit de la voix :** Très lent, Lent, Normal\*, Rapide, Très rapide
- **Voix :** Voix 1\*, Voix 2
- **Autofocus :** Déverrouillé\*, Verrouillé

Vous pouvez configurer davantage votre système en sélectionnant Tous les réglages à la fin du menu des Réglages.

Vous pouvez aussi accéder à ces réglages en sélectionnant et ouvrant les Réglages dans le menu Carrousel :



Les Réglages contiennent 4 menus principaux : Visuel, Audio, Général et À propos. Défilez vers le haut ou le bas dans les Réglages pour sélectionner un menu. Prodigy annoncera « sous-menu » si un menu sélectionné contient des sous-menus et affichera une flèche sur le bord droit de l'écran. Pour ouvrir un menu ou un sous-menu, sélectionnez-le puis touchez l'écran. Lorsque vous avez atteint le réglage à modifier, touchez l'écran ou glissez votre doigt vers le haut ou vers le bas pour faire défiler les valeurs modifiables. Touchez le bouton Retour pour retourner à l'écran précédent. Gardez votre doigt sur le bouton Retour pour quitter les Réglages où que vous soyez dans le menu Réglages.

Le menu **Visuel** contient 2 sous-menus :

**1. Affichage** comporte les réglages suivants:

- **Luminosité de l'écran** (Changer la luminosité de l'écran) : 1 à 100 % (60 %\*)
- **Contraste**: Haute Précision (pour les documents capturés contenant du texte), Couleur\*, Positif, Négatif (voir chapitre 4)
- **Haute Précision** : Toujours\*, Sur demande (voir chapitre 4)
- **Couleurs** (Sélectionnez à partir de 16 paires de couleurs) : Noir sur Blanc\*, Blanc sur Noir, Jaune sur Noir, Orange sur Noir, Cyan sur Noir, Violet sur Noir, Vert sur Noir, Noir sur Vert, Noir sur Violet, Noir sur Cyan, Noir sur Orange, Noir sur Jaune, Bleu sur Jaune, Jaune sur Bleu, Blanc sur Bleu, Bleu sur Blanc
- **Couleur du localisateur** (changer la couleur du localisateur : Rouge\*, Orange, Jaune, Violet, Cyan, Vert, Bleu
- **Zoom favori** (changer le niveau de grossissement initial du localisateur) : 2 à 35x (4x\*)

## 2. Texte comporte les réglages suivants:

- **Mode de lecture** : Page\*, Colonne, Ligne
- **Vitesse de lecture** : Très lente, Lente, Normale\*, Rapide, Très rapide
- **Surlignage** : (En mode colonne ou ligne seulement. Surlignage lors de la prononciation des mots) Afficher\*, Cacher
- **Taille de police**: Minimum, Petite, Moyenne, Standard\*, Grande, Très grande, Très très grande, Maximum
- **Type de police**: Régulier, Gras\*

## AUDIO

Le menu **Audio** contient les réglages suivants :

- **Volume de la tablette** : 0 à 15 (9\*)
- **Volume des écouteurs** (lorsque branchés) : 0 à 15 (3\*)
- **Sons**: Activés\*, Désactivés
- **Vibration de la tablette**: Activée\*, Désactivée
- **Parole**: Activée\*, Document seulement, Désactivée
- **Débit de la voix** : Très lent, Lent, Normal\*, Rapide, Très rapide

- **Voix:** Voix 1\*, Voix 2

## GÉNÉRAL

Le menu Général comporte les éléments suivants:

- **Langue du système:** Langue 1\*, Langue 2 (Les choix dépendent du pays ou de la région)
- **Configuration WI-FI** (L'aide d'une personne voyante est requise)
- **Arrêt automatique tablette:** 3 min\*, 5 min, 10 min
- **Mise à jour logicielle** (voir chapitre 8)
- **Effacer le contenu de la Galerie** (Interface Standard seulement. Efface de façon permanente tous les fichiers de la Galerie.)
- **Rétablir les paramètres par défaut**
- **Revenir dans Android :** Quitte l'application Prodigy. Vous pouvez revenir dans Prodigy en appuyant sur le bouton Accueil et en touchant deux fois l'icône de Prodigy.

## À PROPOS

Le menu **À propos** comporte les éléments suivants :

- **Logiciel** (Version)
- **Voix** (Version)
- **ROC (OCR)** (Version)
- **Numéro de série**
- **Modèle**
- **Android** (Version)

## CHAPITRE 6 – ACCÉDER À ANDROID

La tablette Prodigy Connect vous permet d'accéder aux applications d'Android. Veuillez prendre note que Humanware ne fournit aucun soutien technique pour Android et ses applications.

Pour accéder à Android, où que vous soyez dans Prodigy, appuyez simplement sur le bouton Accueil, et vous serez dirigé vers le bureau d'Android. Vous pouvez également toucher le bouton applications récentes puis toucher une application déjà ouverte pour quitter Prodigy et accéder à cette application.

## CHAPITRE 7 – RECHARGER LA TABLETTE

### **Maximiser l'autonomie :**

- En situation d'utilisation intermittente de la tablette, il est recommandé d'entrer en Mode Veille lorsque vous n'utilisez pas la tablette. Appuyez sur le bouton de Mise en marche. L'écran s'éteindra.
- Sortez du Mode Veille en appuyant sur le bouton de Mise en marche.
- Lorsque vous n'utiliserez pas la tablette pendant quelques jours, éteignez-la en appuyant et maintenant enfoncé le bouton de Mise en marche et en sélectionnant Éteindre.

### **Recharger la pile :**

Touchez le bouton Réglages pour accéder aux réglages Glissez vers le haut à partir du premier élément pour annoncer l'état de la pile (si la parole est activée). Si le niveau de charge est inférieur à 10 %, il est recommandé de recharger la pile.

**IMPORTANT : La tablette se réchauffe lorsqu'elle se recharge. Ne rechargez pas la tablette à proximité d'une source de chaleur.**

**IMPORTANT : Ne repliez jamais votre support pliable lorsque votre tablette s'y trouve et que le câble de recharge est branché. Vous pourriez gravement endommager votre câble de recharge ou votre tablette.**

**Pour recharger la pile avec l'alimentation électrique :**

- Branchez le câble USB au bloc d'alimentation de la tablette. Ensuite, branchez soigneusement le câble au port de recharge, puis branchez l'autre extrémité à une prise de courant.
- Laissez votre tablette se recharger jusqu'à ce que la pile soit pleine.

**Pour recharger la pile avec un ordinateur :**

- Branchez le câble USB à la tablette puis au port USB de votre ordinateur.

**Note :** Recharger la pile de cette façon peut prendre plus de temps qu'avec l'alimentation électrique.

### **Précautions à prendre concernant la pile :**

- Ne pas démonter ou modifier la pile.
- Il y a un risque de surchauffe, d'incendie ou d'explosion si la pile est allumée, chauffée, mouillée, subit un impact ou si les bornes sont court-circuitées.

## **CHAPITRE 8 – RECHARGER LA CAMÉRA À DISTANCE**

Votre caméra Sony a une autonomie de 4 heures et devra éventuellement être rechargée.

**Note :** L'aide d'une personne voyante peut être nécessaire pour recharger votre caméra.

Pour recharger votre caméra :

- Branchez soigneusement le connecteur à la prise située sous le couvercle.
- Branchez soigneusement le connecteur USB à votre ordinateur.

- La lumière de recharge devrait être orange lorsque votre caméra se recharge et passer au vert lorsque votre pile est entièrement rechargée.

**Note :** Si vous n'avez pas d'ordinateur, vous pouvez également brancher votre câble USB dans un adaptateur AC (non inclus).

## CHAPITRE 9 – MISE À JOUR LOGICIELLE

Avant de faire une mise à jour logicielle, vous devez configurer le réseau WI-FI avec l'aide d'une personne voyante à partir de la tablette.

- Touchez le bouton Réglages pour accéder aux Réglages et sélectionnez Tous les réglages. Sélectionnez Général puis tapez. Sélectionnez Configuration WI-FI puis tapez.
- Touchez le bouton en haut de votre écran pour allumer votre Wi-Fi.
- Touchez le réseau auquel vous voulez vous brancher.
- Entrez votre mot de passe et cliquez sur Connexion.

- Touchez le Bouton Retour en haut à gauche de votre tablette pour revenir aux Réglages de Prodigy dans le menu général.
- Pour effectuer une mise à jour logicielle, sélectionnez Mise à jour logicielle et tapez.
- Une fois la connexion WI-FI établie, Prodigy vous dira si votre logiciel est à jour ou si une mise à jour est disponible.
- Si une mise à jour est disponible et que vous voulez l'installer, sélectionnez Installer et tapez. Si vous ne voulez pas l'installer, tapez sur Annuler.
- Si vous avez choisi d'installer la mise à jour, Prodigy téléchargera la mise à jour et affichera la progression du téléchargement en pourcentage.
- Votre tablette vous demandera votre permission pour installer la mise à jour. Lorsqu'on vous le demandera, touchez le bouton Installer pour continuer.

- Une fois le téléchargement complété, Prodigy redémarrera automatiquement avec la nouvelle version logicielle.

## **CHAPITRE 10 – DÉPANNAGE**

### **Si l'écran est vide :**

- Diminuer la taille des caractères pour atteindre un niveau de grossissement minimum.
- La tablette pourrait être éteinte ou en Mode Veille. Appuyez sur le bouton de Mise en marche pour sortir du Mode Veille ou pour la mettre en marche.

### **Si les couleurs sont difficiles à détecter :**

- Assurez-vous d'avoir suffisamment de lumière ambiante.
- Choisissez un contraste ou des couleurs différentes dans les Réglages.
- Ajustez la luminosité dans les Réglages.

### **S'il y a trop d'éblouissement :**

- Inclinez l'objet dans une autre direction pour réduire l'éblouissement.

- Réduisez la luminosité dans les Réglages.
- Réduisez les facteurs externes de lumière.
- Si vous utilisez la tablette et que l'image capturée est trop pâle ou inégale, désactivez le flash dans les Réglages et capturez une nouvelle image.

**Si le texte ou l'image est embrouillé ou flou :**

- Utilisez les touches Zoom avant-arrière pour agrandir et ensuite réduire la taille de l'image afin de déclencher la mise au point de la caméra. Si nécessaire, prenez une nouvelle capture du document.
- Assurez-vous que la caméra est stable lorsque vous capturez une image
- Assurez-vous que la tablette soit hors tension, puis essuyez la surface de la caméra et des lumières DEL avec une lingette de nettoyage.

## **Si la voix est incompréhensible :**

- Assurez-vous que la langue de la Voix soit la même que la langue du document. Changez-la dans les Réglages si nécessaire.

## **Si la tablette ne répond pas :**

- Assurez-vous que la pile soit bien rechargée. Rechargez-la si nécessaire.

## **Autres problèmes :**

- Rétablissez les paramètres par défaut dans les Réglages.
- Communiquez avec votre détaillant ou avec l'assistance technique.

[Fin du document VER-02-2015-08-19]





## Assistance technique

Pour obtenir de l'assistance technique, veuillez communiquer avec le bureau HumanWare le plus près de chez vous, ou consulter notre site Internet:

[www.humanware.com/prodigi\\_support](http://www.humanware.com/prodigi_support)

**Général:** [support@humanware.com](mailto:support@humanware.com)

**Amérique du Nord:** 1 (800) 722-3393  
[us.support@humanware.com](mailto:us.support@humanware.com)

**Europe:** (0044) 1933 415 800  
[eu.support@humanware.com](mailto:eu.support@humanware.com)

**Australie / Asie:** (02) 9686 2600  
[au.sales@humanware.com](mailto:au.sales@humanware.com)

 **Humanware™**

voir les choses. différemment.

ACCD-0134  
REV 01